




SOLUÇÕES CIRÚRGICAS E POR PUNÇÃO PARA CRICOTIREOIDOSTOMIA

SCALPELCRIC USO ÚNICO

UMA OPÇÃO CIRÚRGICA PARA CRICOTIREOIDOSTOMIA

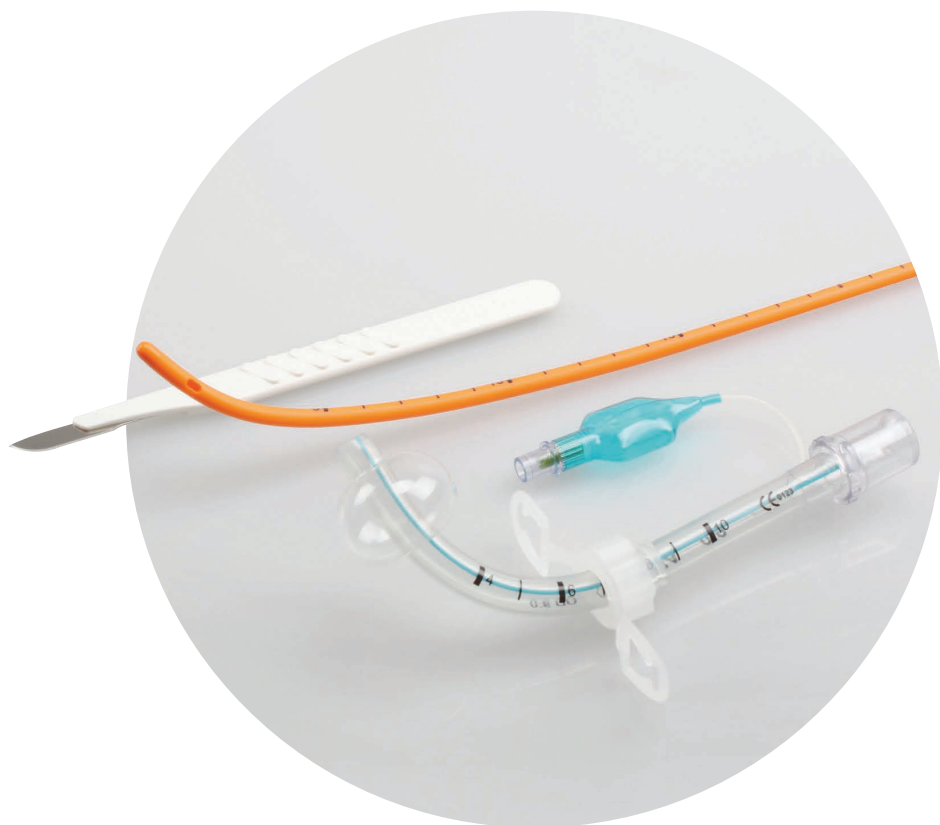


O **ScalpelCric** é um conjunto cirúrgico para cricotireoidostomia com base na simples descrição de 'cortar, torcer, bougie e tubo' e destina-se a facilitar a execução da técnica de bisturi.


O conjunto foi desenvolvido para corresponder às recomendações mais recentes das diretrizes do DAS (Difficult Airway Society 2015).




CORTAR

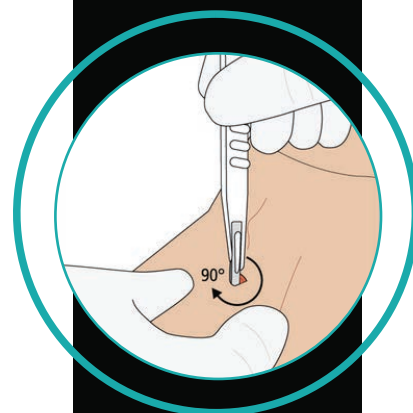

TORCER

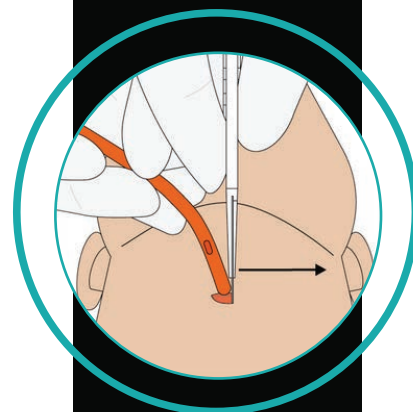


BOUGIE

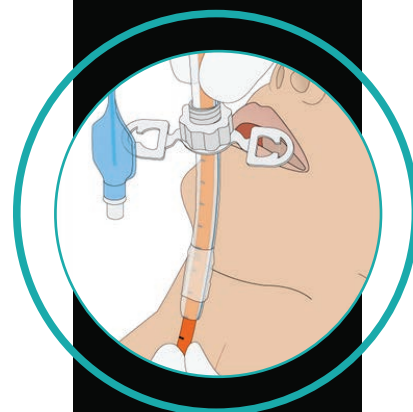

TUBO

Pronto para usar

O conjunto é embalado em uma bolsa estéril específica com cada componente organizado na ordem de uso. Isso reduz o risco de confusão no momento crítico do procedimento. Cada componente é projetado para melhorar a segurança e a eficácia da técnica.

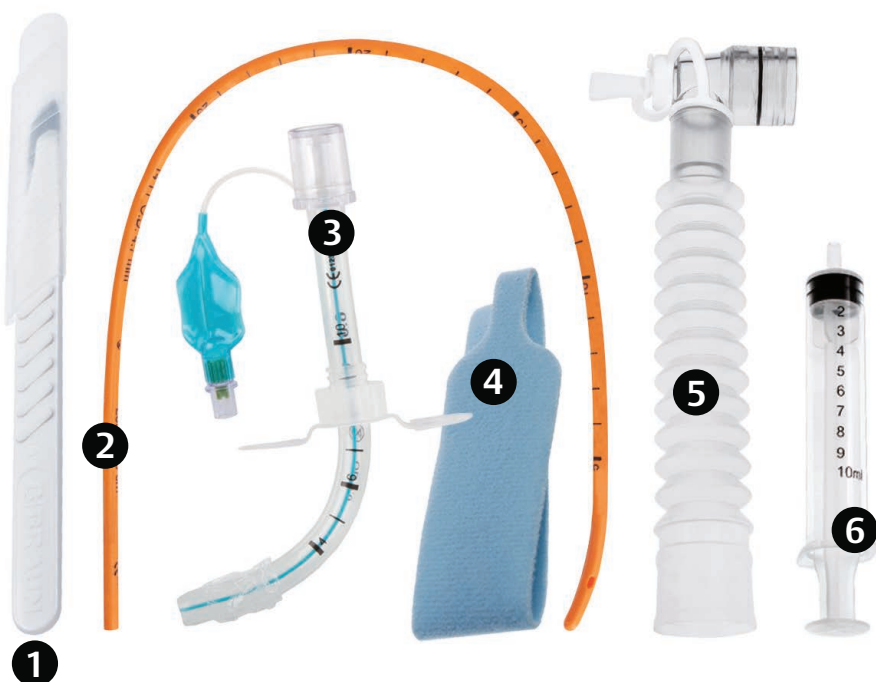

Kit ScalpelCric

Ref.	Descrição	Caixa
30-08-447-1	Kit ScalpelCric (Estéril)	1

- 1 Bisturi # 10
- 2 Bougie 14 CH (40 cm)
- 3 Tubo de 6.0 mm
- 4 Fixador
- 5 Tubo de Extensão
- 6 Seringa 10ml

▶ Video
Use of ScalpelCric




Information material also available at
www.vbm-medical.com/download/media

Características:

BOUGIE

- 40 cm de comprimento para facilitar a manipulação
- Marcas de graduação para uma inserção segura
- Superfície de baixa fricção permite fácil acesso ao tubo
- Ponta arredondada evita trauma traqueal
- Material exclusivo permite moldar o bougie antes da inserção

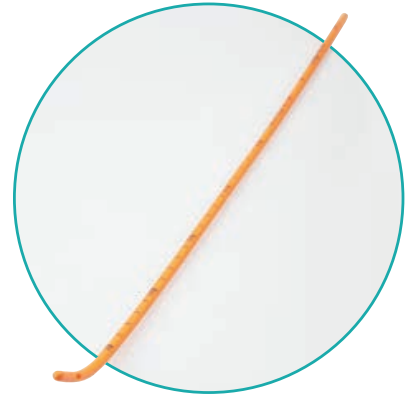

TUBO DE 6,0 MM

- 1 Flange ajustável
- 2 Braçadeira de baixa pressão, parede fina
- 3 Ponta suave para facilitar a inserção

VENTILAÇÃO

- A tubulação de extensão com porta de sucção aumenta a segurança contra a aspiração



FIXAÇÃO

- Fixador com velcro para melhor fixação do tubo


KIT DE CRICOTIREOIDOSTOMIA

UMA OPÇÃO POR PUNÇÃO PARA CRICOTIREOIDOSTOMIA

A cricotireoidostomia é um procedimento de emergência feito para evitar a asfixia causada por alguma obstrução da via aérea, ou quando a intubação e a traqueostomia não são possíveis (Ex.: trauma facial, edema de glote, corpo estranho, tumores).



Dispositivos
estéreis, pré-montados
e prontos para uso.

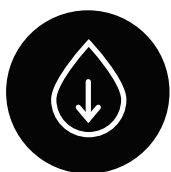

Redução do
risco de
sangramento




Fixação
Rápida e
Segura



Sistema único
para acesso
da via aérea.

QUICKTRACH - I

USO ÚNICO

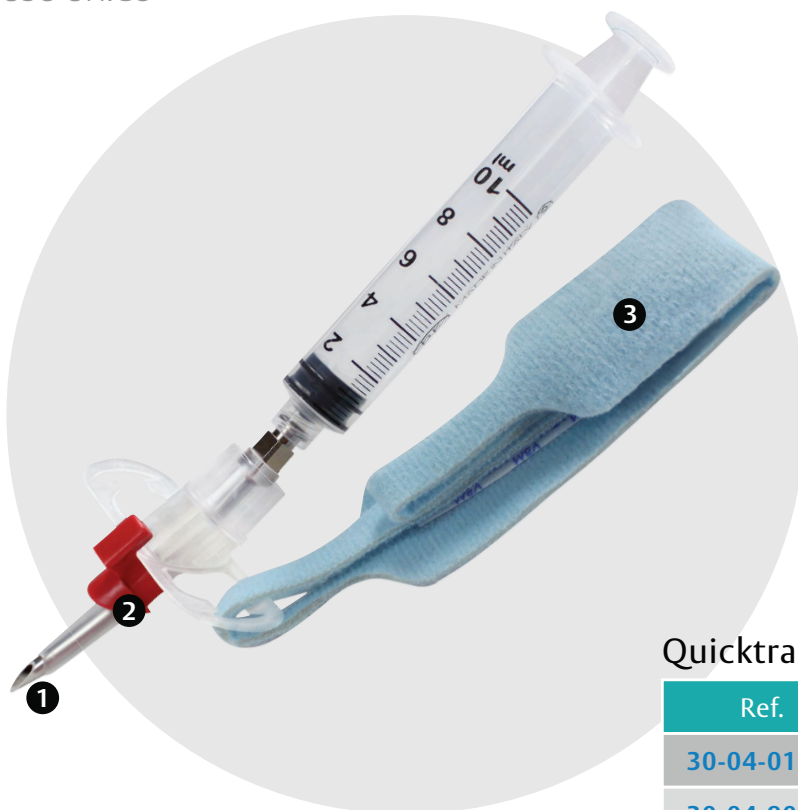

1 AGULHA DE METAL

Ponta afiada dispensa o uso de bisturi, permitindo um corte de 2mm e uma dilatação de 4mm (tamanho adulto).

2 LIMITADOR

Impede a introdução profunda da agulha, reduzindo o risco de danos à parede posterior da traquéia.

3 FIXADOR


Feito em algodão, oferece uma fixação segura.

Quicktrach - I

Ref.	D.I.	Paciente	Caixa
30-04-015-1	1.5mm	Neonatal	1
30-04-902-1	2.0mm	Pediátrico	1
30-04-904-1	4.0mm	Adulto	1

QUICKTRACH - II COM BALÃO

USO ÚNICO

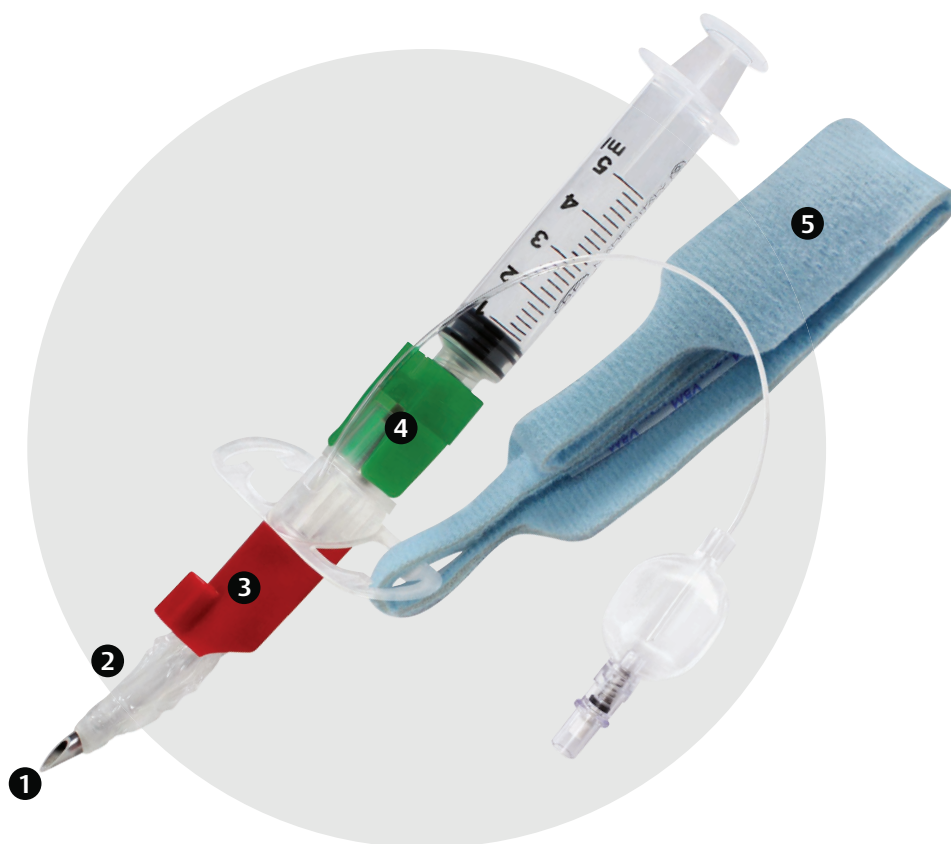


- 1 AGULHA DE METAL**
Dispensa o uso de bisturi, permitindo um corte de 2mm e uma dilatação de 4mm (tamanho adulto).
- 2 CÂNULA COM CUFF**
Depois de retirada a agulha, a cânula mantém sua forma anatômica, ajustando-se perfeitamente à traquéia.
- 3 LIMITADOR**
Impede a introdução profunda da agulha, reduzindo o risco de danos à parede posterior da traquéia.
- 4 TRAVA DE SEGURANÇA**
Impede que a agulha avance para fora da cânula protegendo sua ponta.
- 5 FIXADOR**
Feito em algodão, oferece uma fixação segura.

Quicktrach - II com balão

Ref.	D.I.	Paciente	Caixa
30-10-904-1	4.0 mm	Adulto	1

TUBO PLÁSTICO

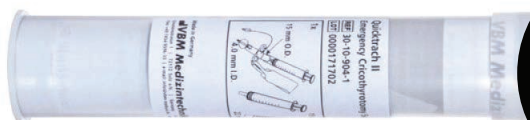

Ideal para bolsas de emergências (compacto e robusto)